



Икроножные имплантаты

Два профиля, девять размеров
икроножных имплантатов,
наполненных силиконовым гелем



Средний профиль



Анатомический профиль

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

Икроножные имплантаты, CE 0483

Описание продукции

Икроножные имплантаты производятся среднего и анатомического профилей, используются для увеличения голени и реконструкции после потери мягких тканей.

Три размера анатомического профиля и шесть размеров среднего профиля икроножных имплантатов позволяют идеально корректировать латеральную и медиальную области musculus gastrocnemius как у мужчин, так и у женщин.

Информация о материалах

Оболочка, которая содержит барьерный слой, заполнена высоко перекрестносвязанным силиконовым гелем. Более плотная консистенция силиконового геля удовлетворяет все требования к большим нагрузкам на икроножные имплантаты.

Карман в дистальном конце имплантата в комплексе с гладкой поверхностью облегчают введение и размещение имплантата с помощью инструмента.

Производство и качество имплантатов соответствуют требованиям международных стандартов по контролю качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые материалы разрешены к применению в медицинской практике.

Показания

- Увеличение
- Коррекция контура ног, например, после полиомиелита, в случае врожденных дефектов
- Коррекция после неврологических заболеваний
- Коррекция аплазии и гипоплазии
- Реконструкция, например, после травмы
- Замена имплантатов

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Alzheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30

✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com




Каталожный номер	Вес (г)	Размеры (см)		
		A	B	C

Средний профиль, наполненные силиконовым гелем, POLYsmooth™ (гладкие)

10200-012*	12	2.1	1.6	6.2
10200-030	30	3.0	1.9	10.2
10200-070	70	3.3	2.5	15.7
10200-090	90	3.2	2.3	19.5
10200-120	120	3.4	2.5	26.6
10200-140	140	4.4	2.5	26.2


(* изготавливается по заказу)

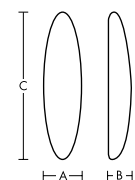

Анатомический профиль, наполненные силиконовым гелем, POLYsmooth™ (гладкие)

10201-085	85	4.7	2.4	15.1
10201-140	140	5.4	2.5	19.7
10201-180	180	5.8	2.6	23.1

Размеры приблизительные

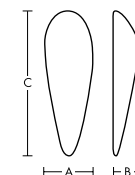

Важная информация

Икроножные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на детальную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:

ООО «Политех Хелс Украина»

01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509

тел/факс (044) 4559919

e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua