



Пекторальные имплантаты

Наполненные силиконовым гелем пекторальные имплантаты производятся анатомической формы для левой и правой стороны



левый



правый

Implants made by POLYTECH – Quality made in Germany

Пекторальные имплантаты, СЕ 0483

Описание продукции

Наполненные силиконовым гелем пекторальные имплантаты производятся в виде текстурированных имплантатов овальной формы для увеличения и реконструкции при дефектах мягких тканей. По требованию пекторальные имплантаты могут также производиться и с гладкой поверхностью.

Учитывая возможность больших нагрузок на имплантаты, по сравнению, например, с имплантатами молочной железы, было отдано предпочтение гелю с плотной консистенцией. Для облегчения введения на медиальном крае имплантата расположен так называемый специальный «язычок».

Однокамерные пекторальные имплантаты имеют разные размеры и производятся для левой и правой стороны грудной клетки.

Информация о материале

Оболочка пекторальных имплантатов, так же как и ягодичных имплантатов, состоит из прочного, упругого и высокоэластичного силиконового эластомера с барьерным слоем. Имплантаты наполнены высокоперекрестносвязанным силиконовым гелем.

Производство и качество имплантатов соответствуют требованиям международных стандартов по контролю качества ISO 9001 и ISO 13485. Все используемые материалы разрешены к применению в медицинской практике.

Способ применения

Пекторальные имплантаты используются как в эстетической, так и в реконструктивной хирургии. Для установки обычно используется аксиллярный доступ в положении пациента на спине, в отведении руки на 90° с целью поднятия мышцы. Имплантаты могут быть установлены субмускулярно.

Показания

- Увеличение контура
- Коррекция формы
- Реконструкция после травмы
- Синдром Поланда
- Замена имплантата

Производитель:

POLYTECH Health & Aesthetics GmbH

Altheimer Str. 32 • 64807 Dieburg • Germany

☎ +49 (0) 60 71 98 63 0 • 📠 +49 (0) 60 71 98 63 30


✉ info@polytechhealth.com • www.polytechhealth.com





Разрез



Введение имплантата

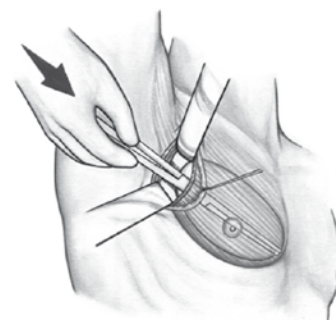

Окончательный результат

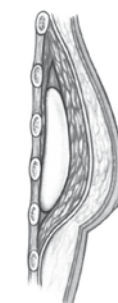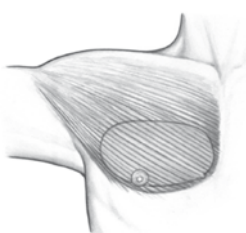


| Ката- ложный номер | Вес (г) | Размеры (см) | | |
|--------------------------|------------|-----------------|---|---|
| | | A | B | C |

Овальные, текстурированные

| | | | | |
|------------|-----|------|-----|------|
| 20500-190R | 192 | 14.7 | 2.4 | 10.2 |
| 20500-190L | 192 | 14.7 | 2.4 | 10.2 |
| 20500-230R | 231 | 16.0 | 2.7 | 10.7 |
| 20500-230L | 231 | 16.0 | 2.7 | 10.7 |
| 20500-300R | 301 | 16.9 | 2.9 | 11.6 |
| 20500-300L | 301 | 16.9 | 2.9 | 11.6 |

R = правый, L = левый

Размеры приблизительные

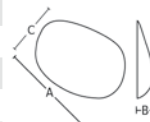

Пекторальные имплантаты с гладкой поверхностью производятся по требованию. Для заказа замените первые две цифры каталожного номера на 10, например, 10500-230R для гладких имплантатов весом 231г., для правой области грудной клетки.

Важная информация

Пекторальные имплантаты поставляются упакованными поштучно и стерильными.

Внимание: Пожалуйста, обратите внимание на подробную инструкцию по использованию, которая прилагается к каждому имплантату.

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине:

ООО «Политех Хелс Украина»

01133, г. Киев, бул. Л.Украинки, 26, оф. 509

тел/факс (044) 4559919

e-mail: polytechhealth@gmail.com • www.polytechhealth.com.ua